

Achtung: Um das Infektionsrisiko und/oder das Risiko anderer Komplikationen zu minimieren, darf derselbe Katheter nicht mehrmals verwendet werden. Entsorgen Sie den Katheter nach dessen Gebrauch. Sollten Schmerzen oder Beschwerden beim Gebrauch auftreten, fahren Sie mit der Benutzung nicht fort und suchen Sie umgehend einen medizinischen Ansprechpartner auf.

Hinweis: Bevor Sie dieses Hilfsmittel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie (1.) alle Informationen über die Anwendung des Produktes einschließlich aller Hinweise und der Gebrauchsanweisung sowie (2.) alle anderen Packungsbeilagen und Etiketten, die bei der Produktlieferung enthalten waren, aufmerksam gelesen haben.

Bitte suchen Sie Ihren Arzt vor Verwendung des Produktes auf, wenn bei Ihnen eine der folgenden Erkrankungen vorliegt: Urethra ruptur, unerklärliche Harnröhrenblutungen, Harnröhrenverengungen, Urethritis (Entzündung der Harnröhre), Prostatitis (Entzündung der Prostata), Epididymitis (Entzündung der Samenleiter). Intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) sollte nur nach ärztlicher Anordnung und unter Beachtung der Anwendungshinweise erfolgen. Befolgen Sie stets die Vorgaben Ihres Arztes oder Ihres medizinischen Ansprechpartners. Intermittierende Selbstkatheterisierung (ISK) wird üblicherweise mindestens viermal in Abständen von 6–8 Stunden durchgeführt. Sollten Sie Fragen zur Katheterisierung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihren medizinischen Ansprechpartner. Nicht verfügbar in den Vereinigten Staaten.

📌📌 Lagern Sie die Katheterboxen bitte in horizontaler Lage und bei normaler Raumtemperatur.

VaPro Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter 	Größe	Länge	Spitze	Farbe des Trichters	Bestell-Nr.	Tarif-Nr.	Packungs-inhalt	Pck. je Orig. Versandk.
	8 Ch	20 cm	♀	Nelaton	72082	50721018	25	10
	10 Ch	20 cm	♀	Nelaton	72102	50721018	25	10
	12 Ch	20 cm	♀	Nelaton	72122	50721018	25	10
	14 Ch	20 cm	♀	Nelaton	72142	50721018	25	10
	8 Ch	40 cm	♂	Nelaton	72084	50721018	25	10
	10 Ch	40 cm	♂	Nelaton	72104	50721018	25	10
	12 Ch	40 cm	♂	Nelaton	72124	50721018	25	10
	14 Ch	40 cm	♂	Nelaton	72144	50721018	25	10
	16 Ch	40 cm	♂	Nelaton	72164	50721018	25	10
	12 Ch	40 cm	♂	Tiemann	73124	50721026	25	10
	14 Ch	40 cm	♂	Tiemann	73144	50721026	25	10
	16 Ch	40 cm	♂	Tiemann	73164	50721026	25	10

VaPro Pocket Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter im Pocketformat 	10 Ch	40 cm	♂	Nelaton	70104	50721052	25	8
	12 Ch	40 cm	♂	Nelaton	70124	50721052	25	8
	14 Ch	40 cm	♂	Nelaton	70144	50721052	25	8
	16 Ch	40 cm	♂	Nelaton	70164	50721052	25	8

VaPro F-Style Berührungsfreier hydrophiler Einmalkatheter aus festerem Kathetermaterial  F-Style	8 Ch	40 cm	♂	Nelaton	7600084	50721061	25	10
	10 Ch	40 cm	♂	Nelaton	7600104	50721061	25	10
	12 Ch	40 cm	♂	Nelaton	7600124	50721061	25	10
	14 Ch	40 cm	♂	Nelaton	7600144	50721061	25	10
	16 Ch	40 cm	♂	Nelaton	7600164	50721061	25	10

VaPro Plus VaPro Plus Pocket Berührungsfreie hydrophile Einmalkatheter mit Auffangbeutel 	VaPro Plus								
	12 Ch	20 cm	♀	Nelaton	○	74122	50722020	25	10
	14 Ch	20 cm	♀	Nelaton	●	74142	50722020	25	10
	12 Ch	40 cm	♂	Nelaton	○	74124	50722020	25	10
	14 Ch	40 cm	♂	Nelaton	●	74144	50722020	25	10
	VaPro Plus Pocket im Pocketformat								
	8 Ch	40 cm	♂	Nelaton	●	71084	50722021	25	8
	10 Ch	40 cm	♂	Nelaton	●	71104	50722021	25	8
	12 Ch	40 cm	♂	Nelaton	○	71124	50722021	25	8
	14 Ch	40 cm	♂	Nelaton	●	71144	50722021	25	8
	16 Ch	40 cm	♂	Nelaton	●	71164	50722021	25	8

Österreich
Hollister GmbH
Bergmillergasse 5/1/1, A-1140 Wien
Kundenservice:
Telefon: 01/877 0 800
Mo. – Do.: 8:00 – 16:00 Uhr, Fr.: 8:00 – 14:00 Uhr
Bestellung:
E-Mail: hollisteroesterreich@hollister.com
Fax: 01/877 0800-22
www.hollister.at

© 2018 Hollister Incorporated. Hollister und Logo sowie VaPro, VaPro Pocket, VaPro F-Style, VaPro Plus und VaPro Plus Pocket sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.



Hollister Kontinenzversorgung 2018



Sicherheit Einfachheit Lebensqualität

Berührungsfreie hydrophile Einmalkatheter

VaPro, VaPro Pocket,
VaPro F-Style
VaPro Plus, VaPro Plus Pocket



People First: Andreas Kapfinger, Österreich

Die perfekte Lösung.

Bei Hollister Kontinenzversorgung steht der Mensch im Mittelpunkt.

Wir verstehen unsere Aufgabe darin, einen Beitrag zu erhöhter Lebensqualität zu leisten.


Alles, was wir tun, folgt unserem Leitsatz: **People First.**

Die hydrophilen Einmalkatheter **VaPro, VaPro Pocket, VaPro F-Style, VaPro Plus, und VaPro Plus Pocket** überzeugen durch Sicherheit und einfache Handhabung. Mit ihren durchdachten Produkteigenschaften helfen sie, die Lebensqualität von Betroffenen zu steigern. Sie sind leicht zu öffnen und ohne weitere Vorbereitungen sofort einsatzbereit. Dank der sterilen Folienumhüllung ist die Anwendung berührungsfrei. So bleiben die Katheter vor der Kontamination mit Bakterien geschützt. Die Produkte der VaPro Pocket Familie bestechen zusätzlich mit einer diskreten und zugleich platzsparenden Verpackung sowie einer kleinen Box mit zwei praktischen Entnahmemöglichkeiten.

Beschichtungstechnologie mit Wasserdampf

Die Katheter der VaPro Produktlinie funktionieren mit der innovativen Wasserdampftechnologie, sodass diese beim Öffnen der Verpackung bereits hydriert sind. Eine Zugabe von Wasser ist nicht erforderlich.

Das steckt dahinter: In der Verpackung befinden sich sterile Wasserdampfmoleküle. Diese aktivieren die hydrophile Beschichtung des Katheters und sorgen für seine Gleitfähigkeit und sofortige Gebrauchsfertigkeit, noch während der Katheter in der Verpackung ist.

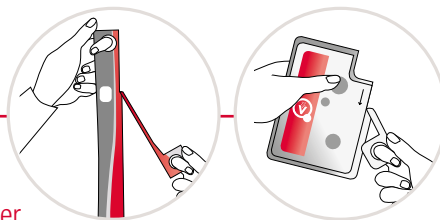


So lässt sich die patentierte Verpackung ganz einfach öffnen:

- Stecken Sie Ihre Zeigefinger etwa bis zur Hälfte durch die vorgestanzten Fingerlöcher. Die Verpackung sollte dabei mit der Vorderseite zu Ihnen gerichtet sein.
- Ziehen Sie die Verpackung mit leichtem Zug entlang des markierten Pfeils, so weit Sie möchten, nach unten auf.

People First: Andreas Kapfinger, Österreich

Andi war als sehr erfolgreicher Snowboarder und Extremreiter bis ins Alter von 19 Jahren aktiv. Seit einem schweren Snowboardunfall im Jahr 1997 sitzt er im Rollstuhl. Sein Ehrgeiz und seine unermüdliche Motivation waren ausschlaggebend für weitere sportliche Erfolge. Als erfolgreicher Monoski- und Parabobfahrer zeigt er, dass er ein außergewöhnlicher Charakter ist, dem es nicht an Selbstbewusstsein und Kampfermentalität fehlt.

„Ich sehe in meinem Sport nicht nur die Möglichkeit meine Zukunft zu gestalten, sondern ich möchte zeigen, dass sich das Leben mit einer Behinderung zwar verändert, aber trotzdem gleichwertig und lebenswert bleibt.“ Bei der Erreichung seiner Ziele helfen ihm die Unterstützung seiner Tochter Jana und der Ausspruch: „Jetzt erst recht!“

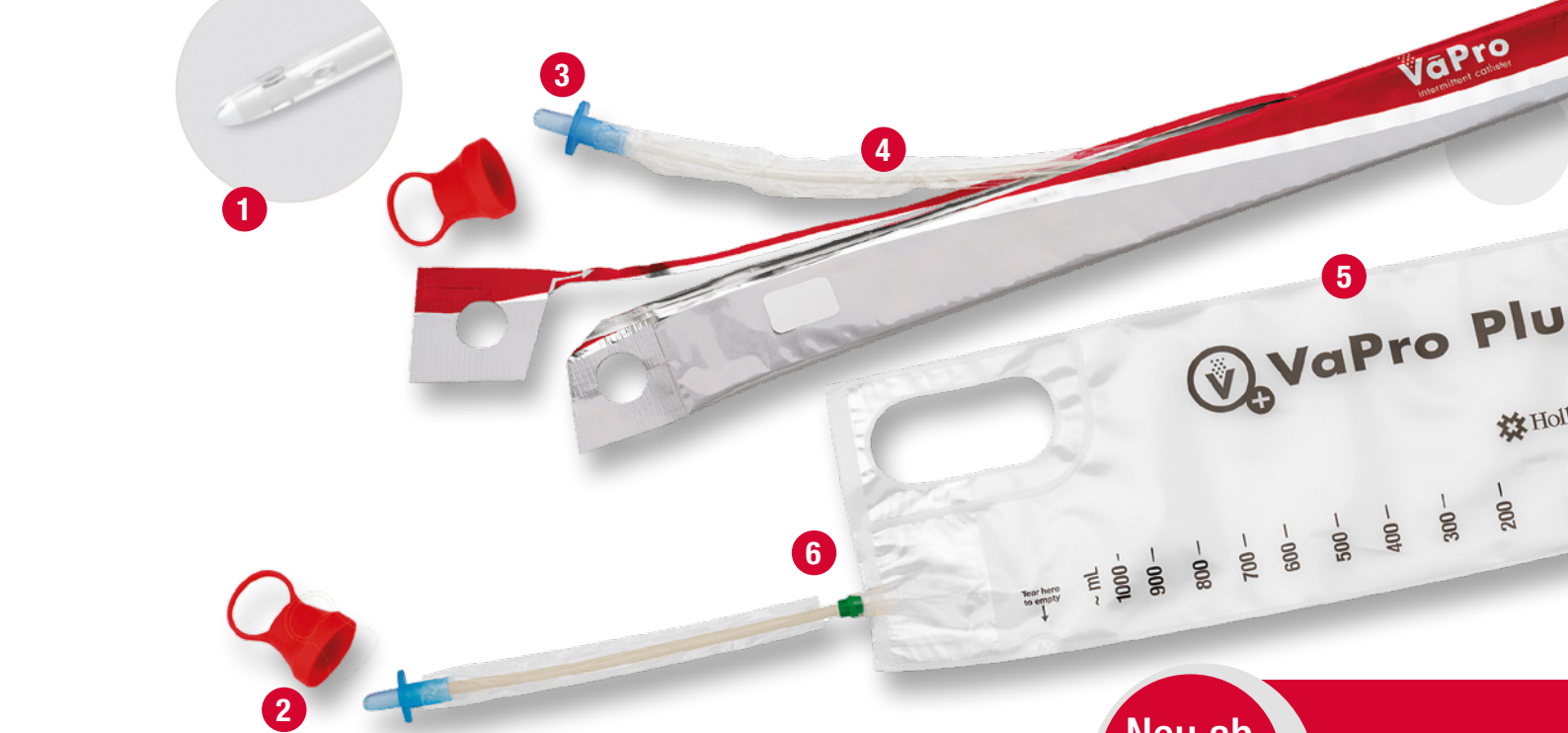

Neu ab
2018


F-Style

- 1 **Sanfte Katheteraugen** sorgen für eine sanfte und sichere Anwendung und helfen, das Risiko traumatischer Verletzungen der Harnröhre beim Einführen und Entfernen des Katheters zu reduzieren.
- 2 Die **Sterilschutzkappe** hilft, die Sterilität der Katheterspitze nach dem Öffnen der Verpackung aufrechtzuerhalten. Die Ringkappe gewährleistet ein einfaches Abnehmen.
- 3 **Schutzhülse**, um den Katheter vor Kontakt mit Keimen und Bakterien im Eingangsbereich der Harnröhre zu bewahren. Die Schutzhülse hilft dabei, das Risiko eines Bakterientransfers in die Blase zu reduzieren.
- 4 **Sterile Folienumhüllung** ermöglicht eine berührungsfreie und sichere Anwendung, weil der Katheter vor der Kontamination mit Keimen geschützt wird.
- 5 **Auffangbeutel** – beim VaPro Plus und VaPro Plus Pocket. Der integrierte Auffangbeutel hat ein Fassungsvermögen von 1.000 ml und ermöglicht eine diskrete und sichere Entleerung der Harnblase – sowohl zu Hause als auch unterwegs.
- 6 Die **Rücklaufsperre** verhindert den Rückfluss des Urins über den Katheter und beugt Infektionen vor (VaPro Plus und VaPro Plus Pocket).

NEU! VaPro F-Style

Der VaPro F-Style ist ein Einmalkatheter aus festerem Material für Anwender mit dem Wunsch nach noch mehr Kontrolle – mit den bewährten Sicherheitsmerkmalen der VaPro-Produktfamilie.

- Noch mehr Kontrolle beim Einführen
- Für alle, die stabilere Katheter bevorzugen
- Speziell für Anwender mit eingeschränkter Handfunktion

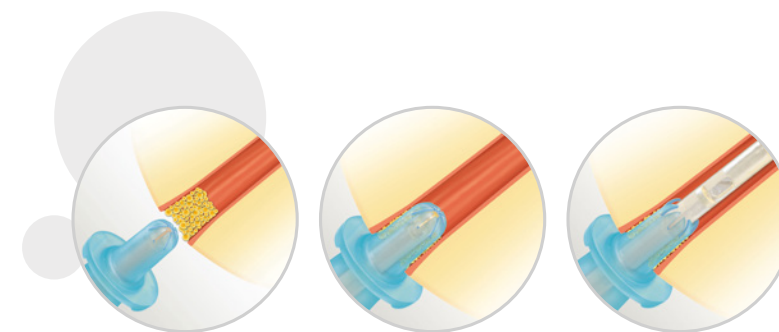

In der Harnröhre können sich überwiegend in den vorderen 15 mm viele Keime und Bakterien befinden. Die bewährte Schutzhülse überbrückt diesen Bereich und hilft so, den Katheter vor direktem Kontakt zu schützen. Der Katheter kommt erst nach dieser kritischen Zone von 15 mm mit der Harnröhre in Kontakt. Das Risiko eines Bakterientransfers in die Harnblase wird dadurch gesenkt.